


Suivez ces instructions étape par étape :

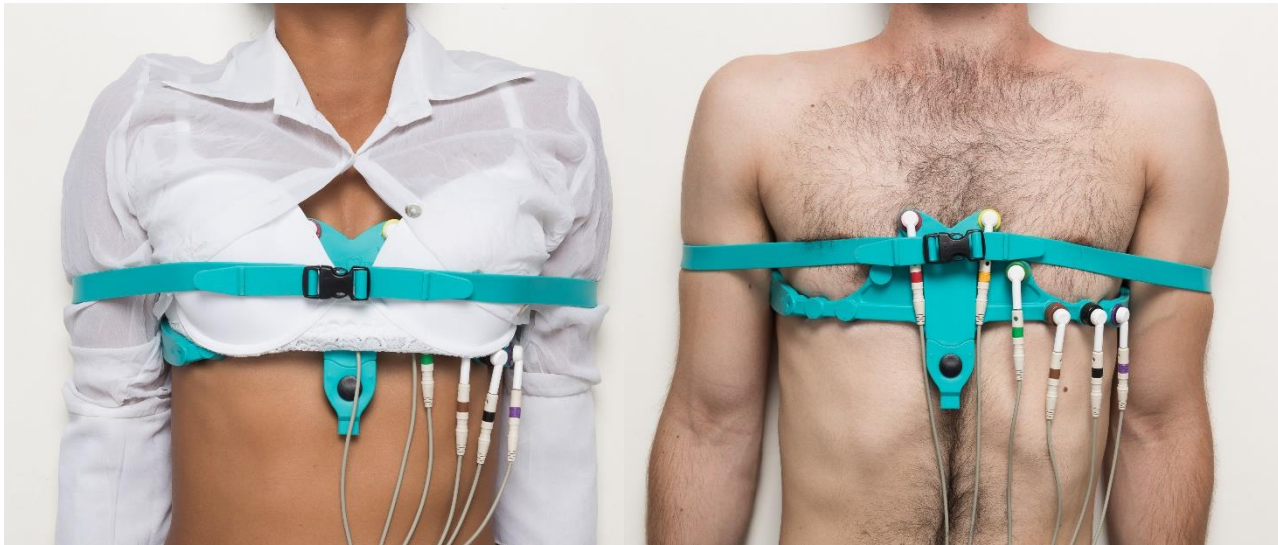

Ceinture ECG LevMed AllBrand™ avec brides

**Vérifiez que le câble patient ECG est
connecté à l'appareil ECG.**

Vérifiez que les vis sur la ceinture ECG sont fermement serrées :



Connectez le câble patient ECG aux vis à l'aide des connecteurs à pression/à pince :

*Adaptateur de fiche
banane à fiche à pression*



*Adaptateur de fiche banane à
fiche à pince*



*Si votre câble patient ECG possède des connecteurs à fiche banane, utilisez les adaptateurs fiche banane à fiche à pression, ou fiche banane à fiche à pince.


Connectez le câble patient ECG à chacune des 4 électrodes à pinces :

Pour les fiches banane du câble patient :



1. Ouvrez la vis.
2. Insérez le connecteur banane
3. Fermez la vis.

Pour les fiches à pression/à pince du câble patient :


1. Fermez la vis.
2. Connectez la fiche à pression/à pince.

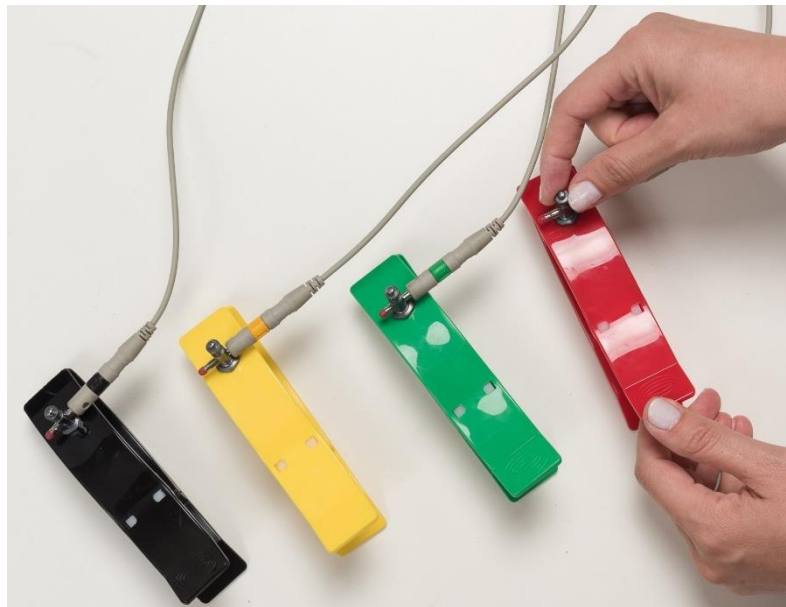

Ouvrez ou retirez la chemise du patient :
 (Remarque : Les boucles de la ceinture ECG seront fermées sur la face AVANT du thorax.)

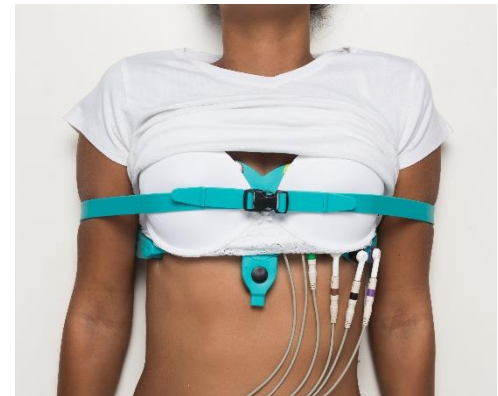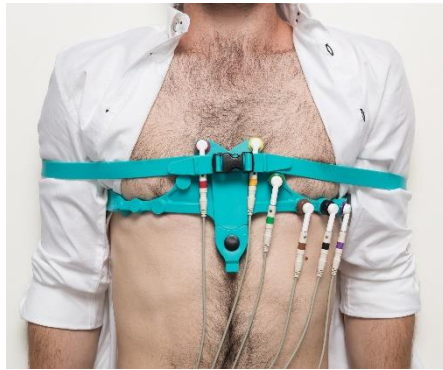


Humidifiez les 6 électrodes (V1 à V6) avec de l'eau du robinet :

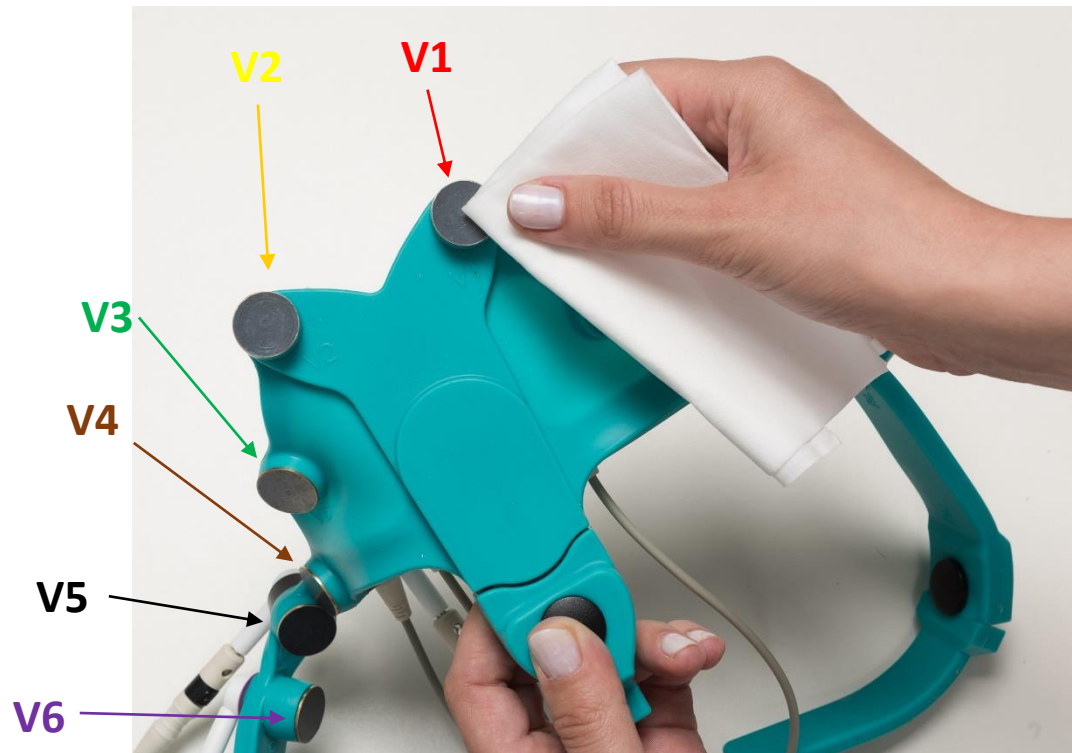

Si nécessaire, inclinez V1 et V2 pour garantir le contact des électrodes avec la poitrine du patient :




Lorsque le patient est confortablement allongé, appliquez la ceinture sur le torse du patient avec V1 et V2 symétriques des deux côtés du sternum :

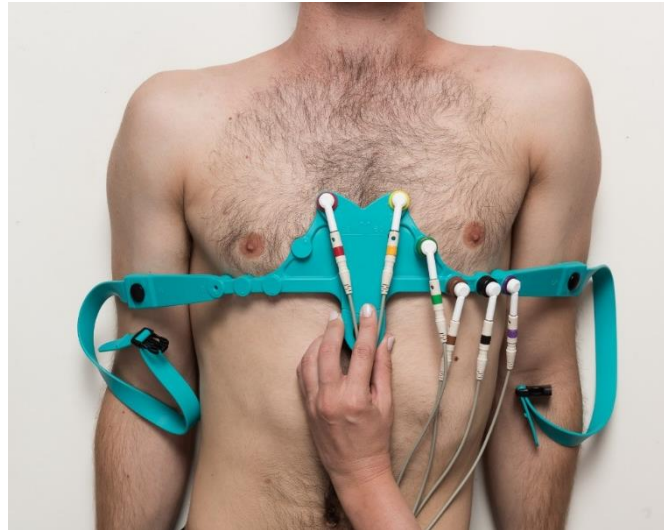


Remarque : Pour les femmes, la ceinture peut être appliquée sous le soutien-gorge :




Appliquez une bride sous le bras à mi-hauteur, entre le coude et l'épaule, puis par-dessus les bras :

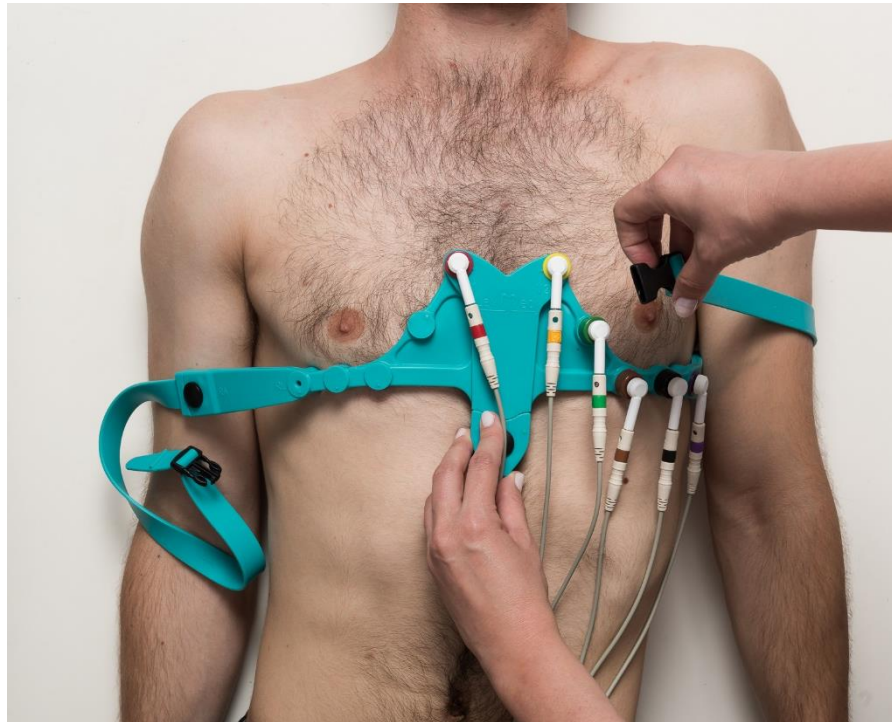


**Appliquez la seconde bride sous
puis par-dessus l'autre bras :**

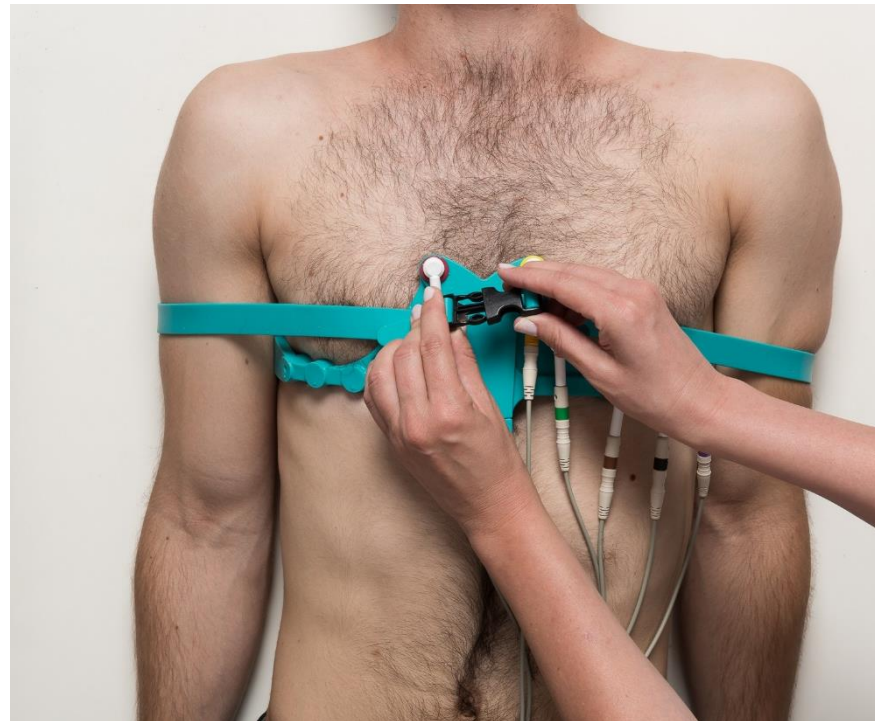


Fermez les boucles par-dessus V1 et V2 :

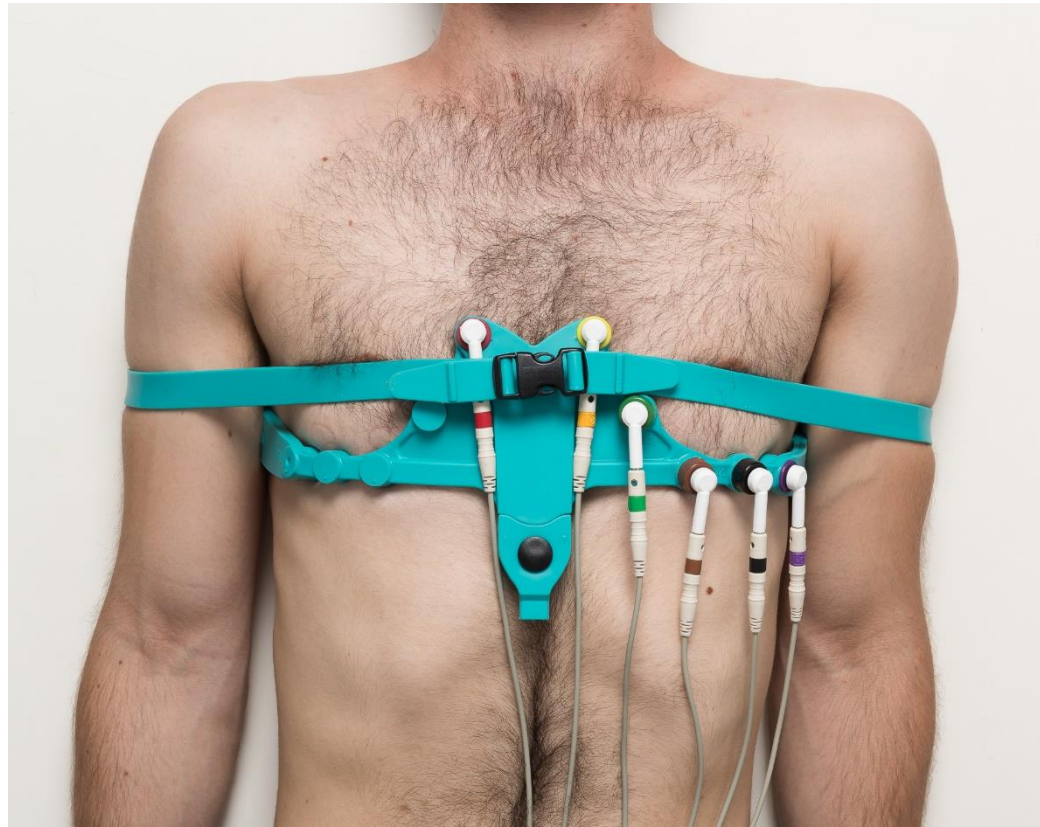

Si nécessaire, ajustez l'emplacement des boucles sur les brides pour s'adapter à la taille du thorax du patient :

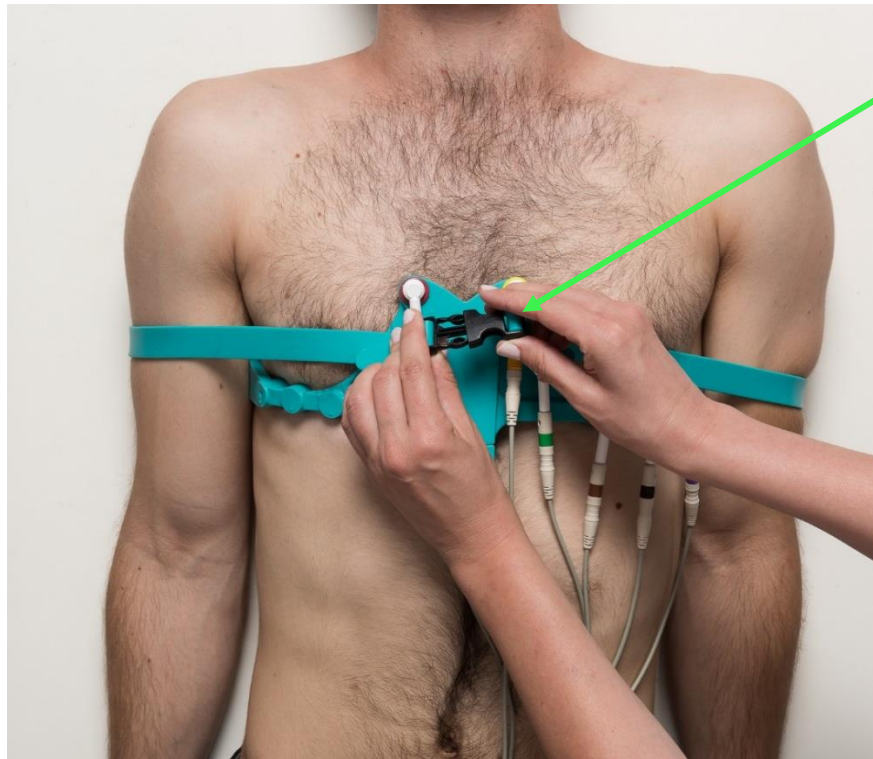


**Vérifiez que les électrodes V4, V5 et V6
se trouvent sous la poitrine :**

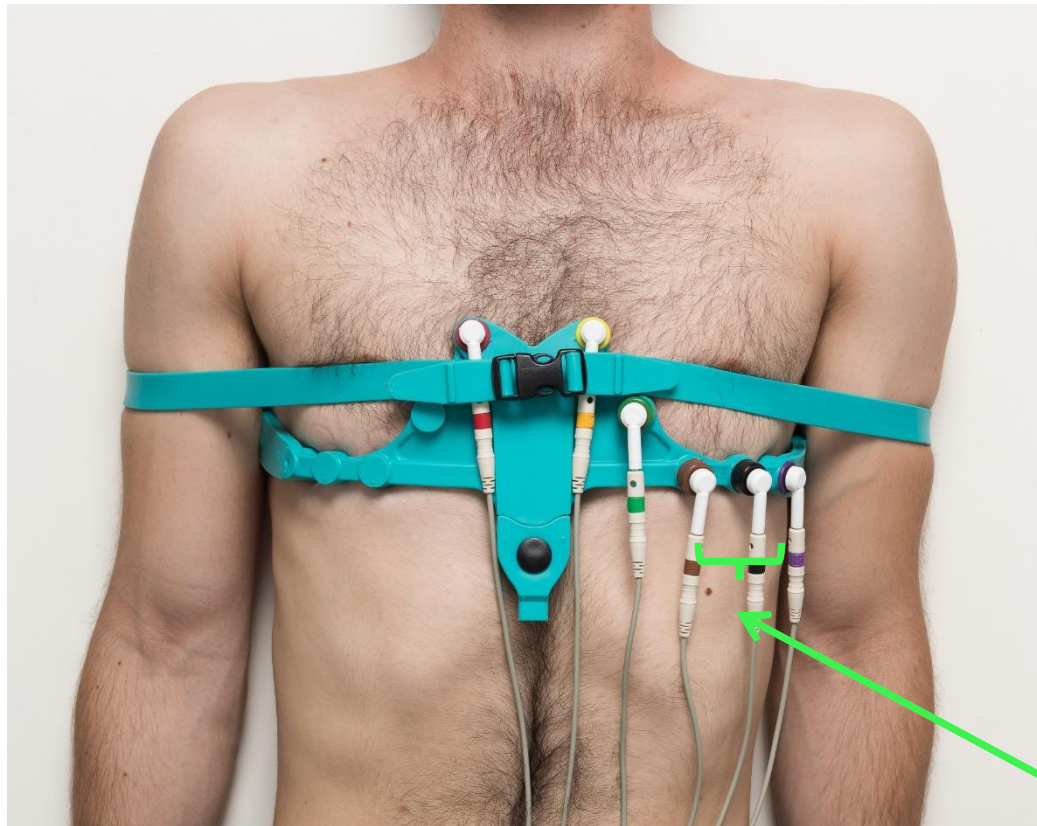


V4, V5, V6

Assurez-vous que les 6 électrodes sont en contact avec la surface cutanée :

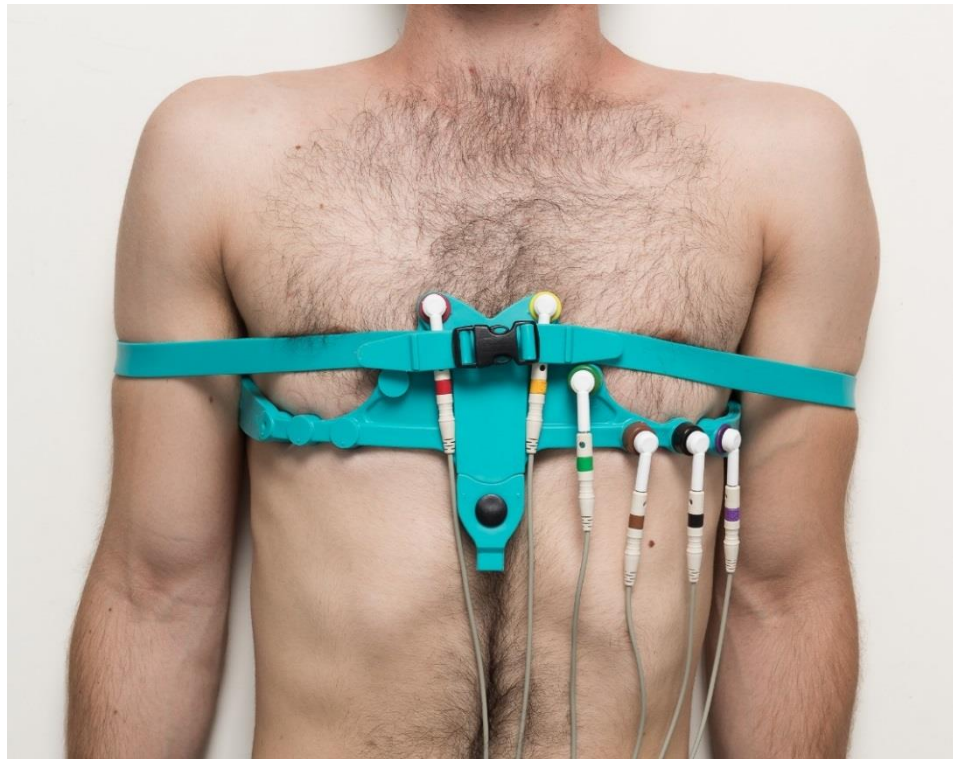

**Humidifiez l'électrode de chacune des
4 électrodes à pinces avec de l'eau du robinet :**

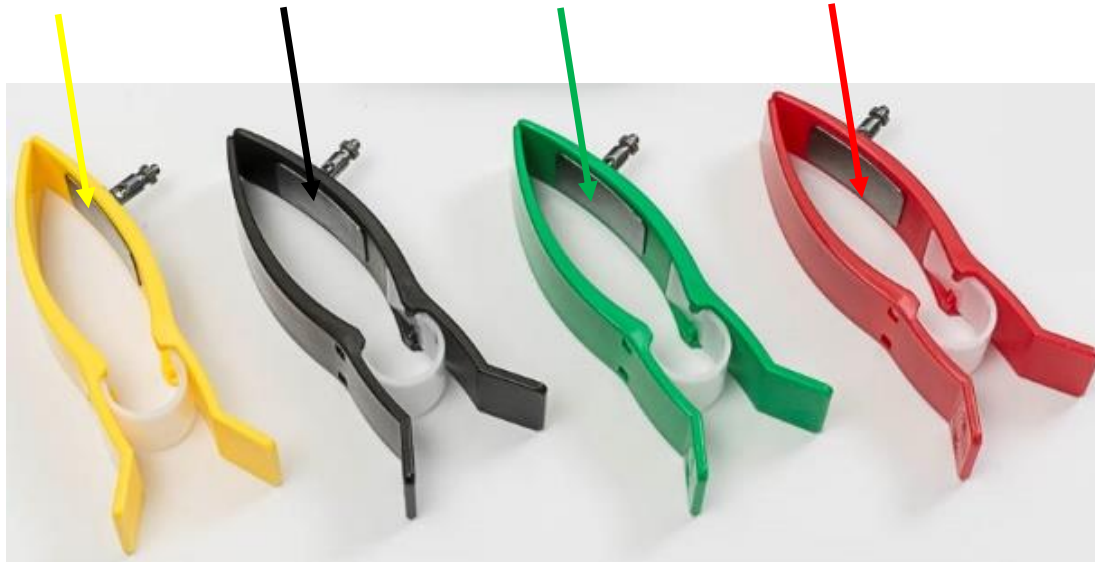

Appliquez les électrodes à pinces sur les membres :

Rouge = Bras droit

Jaune = Bras gauche

Vert = Jambe gauche

Noir = Jambe droite




Assurez-vous que le patient est détendu et ne contracte pas ses muscles.


Demandez au patient de ne pas parler ni bouger pendant l'examen.



Remarque : Si plus confortable, l'examen peut être effectué lorsque le patient est en position assise :

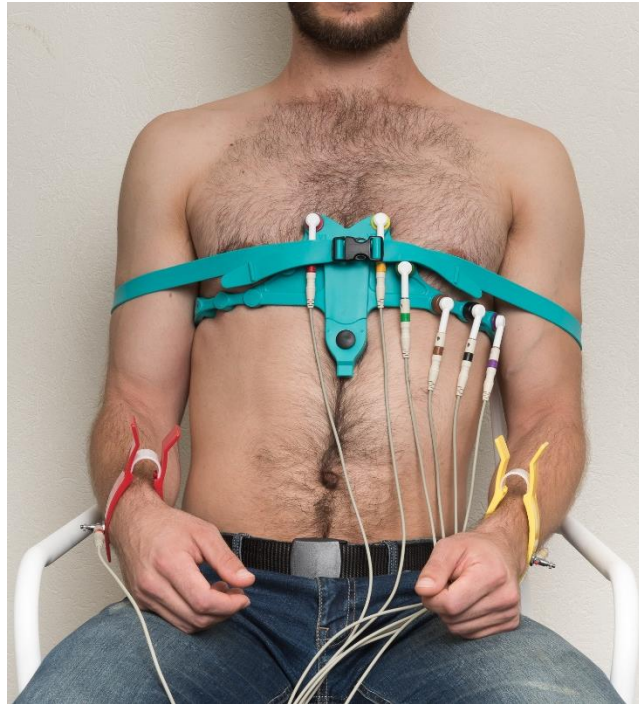

Appuyez sur « **Démarrer** » sur l'appareil ECG pour lancer l'acquisition ECG.

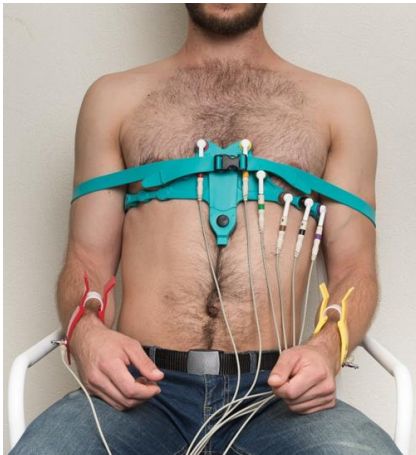

Dépannage

En cas de bruit sur le signal ECG, vérifiez les points suivants :

1. De l'eau a été appliquée sur toutes les électrodes.
2. Toutes les électrodes sont en contact direct avec la surface cutanée.
3. Le patient est détendu, ses muscles ne sont pas contractés.





Merci d'utiliser la ceinture LevMed AllBrand™ ECG !

Pour plus d'informations, contactez-nous à
l'adresse info@levmed.net