

seca 745

seca 725

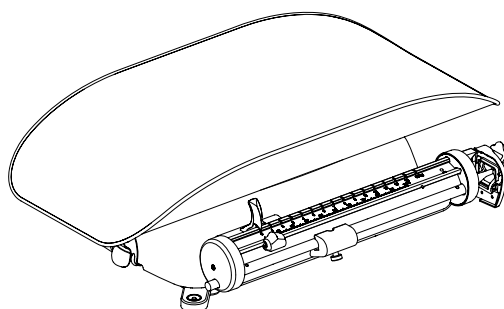


TABLE DES MATIÈRES

1. Description de l'appareil	46	5. Utilisation	54
1.1 Domaine d'utilisation	46	5.1 Préparation de la balance	54
1.2 Description du fonctionnement	46	Bloquer/Débloquer la coulisse	54
1.3 Qualification de l'utilisateur	46	Contrôler la position de la coulisse	54
2. Informations relatives à la sécurité	47	Équilibrage de la coulisse	55
2.1 Consignes de sécurité de ce mode d'emploi	47	5.2 Pesage	57
2.2 Consignes de sécurité fondamentales	47	Pesée	57
Utilisation de l'appareil	47	Déduire un poids supplémentaire	58
Éviter les infections	48	6. Traitement hygiénique	59
Éviter les blessures	48	6.1 Nettoyage	59
Éviter les dommages matériels	48	6.2 Désinfection	59
Utilisation des résultats de mesure	49	6.3 Stérilisation	60
Utilisation du matériel d'emballage	49	7. Contrôle fonctionnel	60
3. Aperçu	50	8. Que faire si...	61
3.1 Éléments de commande	50	9. Maintenance/Réétalonnage	61
3.2 Marquages sur l'appareil et sur la plaque signalétique	51	9.1 Informations sur la maintenance (seca 725)	61
3.3 Marquages sur l'emballage	52	9.2 Informations sur la maintenance et le réétalonnage (seca 745)	62
4. Avant de commencer...	52	10. Caractéristiques techniques	62
4.1 Éléments livrés	52	10.1 Caractéristiques techniques générales	62
4.2 Retrait de la protection pour le transport	53	10.2 Caractéristiques de pesage	63
4.3 Fixation du plateau	53	11. Mise au rebut	63
4.4 Installation et réglage horizontal de la balance	53	12. Garantie	64
		13. Certificat de conformité	64

1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1.1 Domaine d'utilisation

Le pèse-bébé mécanique seca a été conçu pour être utilisé principalement dans les hôpitaux, les cabinets de pédiatrie et les centres de soins hospitaliers.

Cette balance permet de constater le poids de naissance du nourrisson et de contrôler la prise de poids au début de la vie. Elle assiste le pédiatre lorsqu'il est nécessaire d'établir un diagnostic et pour décider d'une thérapie.

Pour l'établissement d'un diagnostic précis, il incombe toutefois au médecin, parallèlement à la mesure du poids, de prescrire des examens ciblés supplémentaires et de tenir compte des résultats correspondants.

1.2 Description du fonctionnement

Sur une balance mécanique, la mesure du poids se fait par l'intermédiaire d'un système de levier. Pour afficher le poids, l'utilisateur déplace deux poids coulissants le long de la coulisse jusqu'à ce que celle-ci soit équilibrée. Ensuite, le poids du patient est lisible à l'endroit où se trouvent les poids coulissants.

La balance doit être utilisée uniquement aux fins mentionnées à la section « Domaine d'utilisation ».

1.3 Qualification de l'utilisateur

L'appareil peut être utilisé exclusivement par un personnel qualifié médical.

2. INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

2.1 Consignes de sécurité de ce mode d'emploi

**DANGER !**

Désigne une situation de danger exceptionnelle. Le non-respect de cette indication entraîne des blessures irréversibles ou mortelles.

**AVERTISSEMENT !**

Désigne une situation de danger exceptionnelle. Le non-respect de cette indication peut entraîner des blessures irréversibles ou mortelles.

**PRUDENCE !**

Désigne une situation de danger. Le non-respect de cette indication peut entraîner des blessures légères ou moyennes.

ATTENTION !

Désigne une possible utilisation incorrecte de l'appareil. Le non-respect de cette indication peut entraîner des dommages à l'appareil ou générer des résultats de mesure erronés.

REMARQUE :

Contient des informations supplémentaires relatives à l'utilisation de cet appareil.

2.2 Consignes de sécurité fondamentales

Utilisation de l'appareil

- Respectez les consignes de ce mode d'emploi.
- Conservez précieusement le mode d'emploi. Le mode d'emploi fait partie de l'appareil et doit toujours être disponible.

**PRUDENCE !****Mise en danger du patient, dommages matériels**

- Effectuez régulièrement des interventions de maintenance et de rééquilibrage comme décrit dans le paragraphe correspondant du mode d'emploi de l'appareil.
- Il est interdit de procéder à des modifications techniques sur l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce nécessitant un entretien par l'utilisateur. Les entretiens et réparations doivent être exclusivement confiés à des partenaires S.A.V. seca autorisés. Pour

connaître le partenaire S.A.V. le plus proche, rendez-vous sur www.seca.com ou envoyez un e-mail à service@seca.com.

- Utilisez exclusivement des accessoires et pièces de rechange seca d'origine. Sinon, seca n'offre aucune garantie.

Éviter les infections



AVERTISSEMENT !

Risque d'infection

- Traitez l'appareil de manière hygiénique à intervalles réguliers comme décrit dans le paragraphe correspondant de ce document.
- Assurez-vous que la patient ne présente aucune maladie contagieuse.
- Assurez-vous que le patient ne présente pas de plaie ouverte ni de modifications cutanées infectieuses qui pourraient entrer en contact avec l'appareil.

Éviter les blessures



AVERTISSEMENT !

Risque de chute

Les pèses-bébés sont positionnés le plus souvent sur des plans de travail surélevés. Si le nourrisson tombe du plan de travail, il risque d'encourir des blessures graves, aux conséquences irréversibles, voire mortelles.

- Assurez-vous que l'appareil repose sur une surface solide et plane.
- Disposez les câbles de raccordement (le cas échéant) de manière à ce que personne ne puisse trébucher.
- Ne laissez jamais le nourrisson sans surveillance.

Éviter les dommages matériels

ATTENTION !

Dommages matériels

- Ne faites pas tomber l'appareil.
- Ne soumettez pas l'appareil à de fortes secousses ou vibrations.
- Effectuez à intervalles réguliers un contrôle de fonctionnement comme décrit dans le paragraphe correspondant de ce document. Ne faites pas fonctionner l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est endommagé.

- Les produits de nettoyage corrosifs peuvent endommager les surfaces. Utilisez exclusivement un chiffon doux imbibé de lessive de savon douce le cas échéant.
- Utilisez des désinfectants adaptés aux surfaces délicates. Vous trouverez des désinfectants appropriés dans le commerce.

Utilisation des résultats de mesure



AVERTISSEMENT !

Mise en danger du patient

Cet appareil n'est **pas** un appareil de diagnostic. Cet appareil permet d'aider le médecin traitant lors du diagnostic.

- Pour élaborer un diagnostic exact et pour initier des traitements, le médecin traitant doit prévoir, en complément à l'utilisation de cet appareil, des examens ciblés dont les résultats sont à prendre en compte.
- La responsabilité des diagnostics et des traitements qui en résultent incombe au médecin traitant.

ATTENTION !

Résultats de mesure contradictoires

- Avant d'enregistrer les valeurs mesurées avec cet appareil en vue d'une exploitation ultérieure (par ex. avec un logiciel pour ordinateur seca ou dans un système d'information hospitalier), assurez-vous qu'elles sont plausibles.
- Si des valeurs de mesures ont été transmises vers un logiciel pour ordinateur seca ou un système d'information hospitalier, assurez-vous qu'elles sont plausibles et affectées au bon patient avant toute exploitation ultérieure.

Utilisation du matériel d'emballage



AVERTISSEMENT !

Risque d'asphyxie

Le matériel d'emballage sous film plastique (sacs) représente un risque d'asphyxie.

- Conservez le matériel d'emballage à l'abri des enfants.
- Si l'emballage d'origine n'est plus disponible, utilisez exclusivement des sacs plastique munis de perforations de sécurité afin de réduire le risque d'asphyxie. Dans la mesure du possible, utilisez des matières recyclables.


REMARQUE :

Conservez le matériel d'emballage d'origine en vue d'une utilisation ultérieure (par ex. renvoi de l'appareil à des fins de maintenance).

3. APERÇU

3.1 Éléments de commande

seca 745/725:

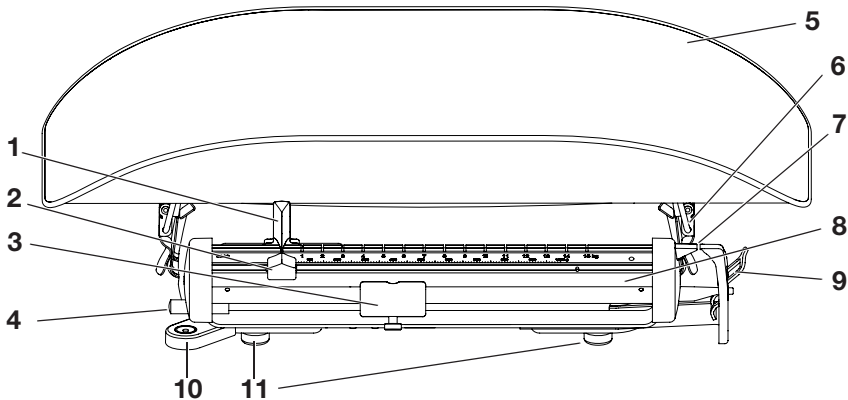

N°	Élément de commande	Fonction
1	Grand poids coulissant	On le fait coulisser pour un premier réglage approximatif de l'affichage du poids • Tirer vers l'avant : débloquer le poids coulissant • Relâcher : bloquer le poids coulissant
2	Petit poids coulissant	On le fait coulisser pour un réglage de précision de l'affichage du poids
3	Poids de tarage avec vis moletée	On le fait coulisser pour équilibrer la coulisse • Lors de la mise en service et avant chaque pesée • Pour la compensation d'un poids supplémentaire
4	Vis de tarage de précision	On le fait coulisser pour équilibrer la coulisse de manière exacte • Lors de la mise en service et avant chaque pesée • Pour la compensation d'un poids supplémentaire
5	Plateau	Surface sur laquelle le nourrisson est allongé

N°	Élément de commande	Fonction
6	Levier de fixation	• 2 pièces • Permettent de fixer le plateau au boîtier de la balance
7	Indicateur et contre-indicateur	Indiquent si la coulisse est équilibrée
8	Coulisse avec graduation	Permet de lire le poids mesuré
9	Levier de blocage	Permet de bloquer/débloquer la coulisse • Appuyer vers le bas : bloquer • Soulever : débloquer
10	Niveau à bulle	Indique si l'appareil est bien à l'horizontale (modèles étalonnés)
11	Pieds	• 4 pièces • Hauteur modulable pour un réglage horizontal précis (modèles étalonnés)

3.2 Marquages sur l'appareil et sur la plaque signalétique


Texte/Symbole	Signification
Modell	Numéro de modèle
Ser. No.	Numéro de série
	Suivre les consignes du mode d'emploi
e	Valeur en unités de masse qui est utilisée pour classer et étalonner une balance (modèles étalonnés)
d	Valeur en unités de masse qui indique la différence entre les valeurs de deux graduations voisines
T	Correspond à la position zéro du poids de tarage. Visible lorsque l'on fait coulisser le poids de tarage depuis la position zéro.
	Balance de la classe d'étalonnage III selon la directive 2014/31/EU
	L'appareil est conforme aux directives CE. • M : Sigle de conformité selon la directive 2014/31/EU sur les balances non automatiques (modèles étalonnés) • 16 : (exemple : 2016) Année d'établissement de la déclaration de conformité et d'apposition du marquage CE (modèles étalonnés) • 0102 : organisme désigné de métrologie (modèles étalonnés) • 0123 : organisme désigné pour les produits médicaux

3.3 Marquages sur l'emballage

	Protéger de l'humidité
	Les flèches indiquent le dessus du produit Transporter et stocker en position verticale
	Fragile Ne pas jeter ni laisser tomber
	Température min. et max. admissibles pour le transport et le stockage
	Humidité de l'air min. et max. admissibles pour le transport et le stockage
	Ouvrir l'emballage ici
	Le matériel d'emballage peut être recyclé conformément aux dispositifs en vigueur


4. AVANT DE COMMENCER...

4.1 Éléments livrés

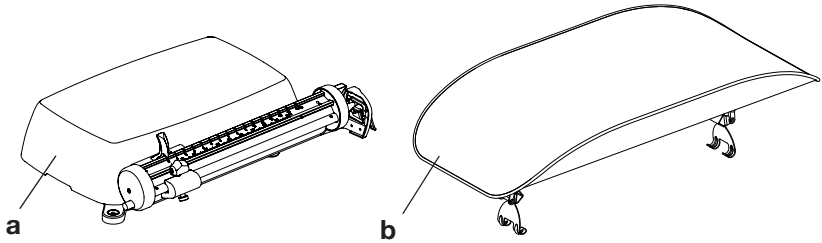

N°	Composant	Qté
a	Balance	1
b	Plateau	1
-	Mode d'emploi, n'apparaît pas ici	1

4.2 Retrait de la protection pour le transport

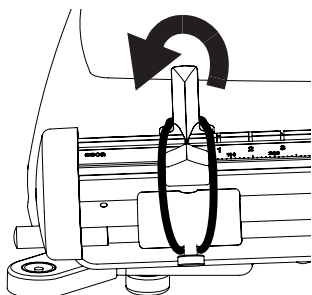


Les poids coulissants et le poids de tarage sont fixés pour le transport par un bracelet élastique.

- ♦ Avant d'utiliser la balance, retirez la protection pour le transport comme illustré sur la figure ci-contre.

REMARQUE :

Conservez la protection de transport pour tout transport ultérieur de la balance.

4.3 Fixation du plateau

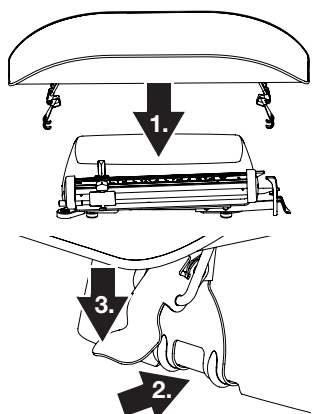

1. Posez le plateau centré sur le corps de la balance.

2. Assurez-vous que les leviers de fixation du plateau s'engagent dans les évidements prévus à cet effet du boîtier.

3. Appuyez les leviers de fixation vers le bas.
Le plateau est fixé au corps de la balance.


4.4 Installation et réglage horizontal de la balance

ATTENTION !

Mesure faussée due à une dérivation de force

Si la balance est mal installée ou positionnée, le poids ne sera pas mesuré correctement.

- Posez la balance sur une surface solide et plane.
- Ne posez pas la balance sur un support mou.
- Installez la balance de manière à ce qu'elle ne soit pas en contact avec un mur ou un objet.

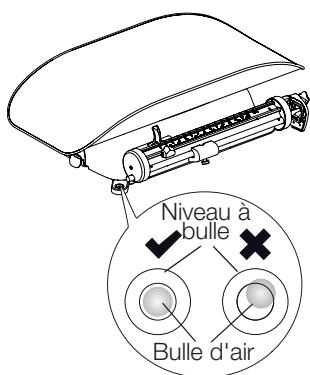

1. Posez la balance sur une surface solide et plane.
2. Modèles étalonnés : Réglez l'orientation de la balance en tournant les pieds de manière à ce que la bulle d'air du niveau à bulle soit parfaitement centrée.

REMARQUE :


Sur les modèles étalonnés, vous pouvez tourner les pieds pour parfaire le réglage horizontal.

5. UTILISATION


5.1 Préparation de la balance

Bloquer/Débloquer la coulisse

La coulisse doit être bloquée pour le transport de l'appareil et lors de la fixation du plateau au boîtier. Avant la pesée, la barre doit être débloquée.

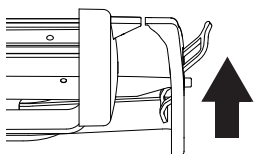


- ◆ Tirez le levier de blocage vers le haut.
La coulisse est débloquée.

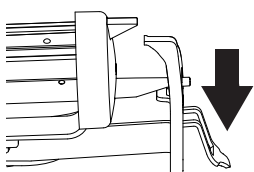

- ◆ Enfoncez le levier de blocage vers le bas.
La coulisse est bloquée.

Contrôler la position de la coulisse

1. Assurez-vous que la coulisse est débloquée (voir la section précédente).
2. Assurez-vous qu'aucune charge ne repose sur la balance.

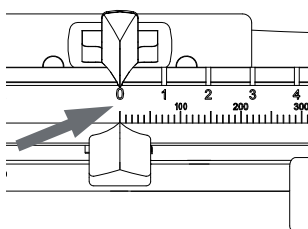

3. Faites coulisser les deux poids jusqu'à la position « 0 ».
4. Attendez jusqu'à ce que la coulisse cesse d'osciller.


ATTENTION !

Mesure faussée due à une dérivation de force


Si vous touchez la balance, le poids ne sera pas mesuré correctement.

- Faites attention à ne pas toucher la balance pendant que la coulisse oscille.


5. Vérifiez que la coulisse est équilibrée. L'indicateur et le contre-indicateur doivent être exactement à la même hauteur.
6. Si l'indicateur et le contre-indicateur ne sont pas exactement à la même hauteur, équilibrez la coulisse comme indiqué dans la section suivante.

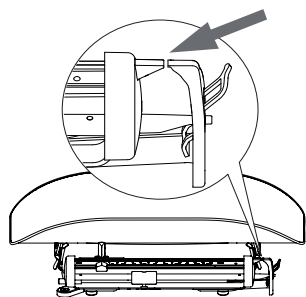

Équilibrage de la coulisse

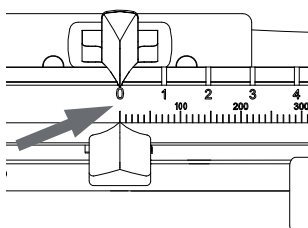

1. Assurez-vous que les deux poids coulissants se trouvent sur la position « 0 ».

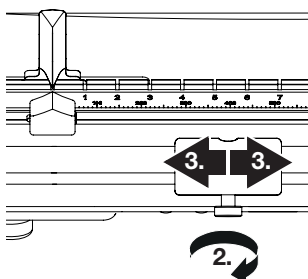


2. Desserrez la vis moletée du poids de tarage.
3. Faites coulisser le poids de tarage pour équilibrer la coulisse.
4. Attendez jusqu'à ce que la coulisse cesse d'osciller.

ATTENTION !


Mesure faussée due à une dérivation de force

Si vous touchez la balance, le poids ne sera pas mesuré correctement.

- Faites attention à ne pas toucher la balance pendant que la coulisse oscille.

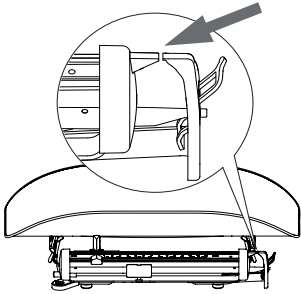

5. Vérifiez que la coulisse est équilibrée.
L'indicateur et le contre-indicateur doivent être exactement ou à peu près à la même hauteur.
6. Répétez l'étape 3 si nécessaire.

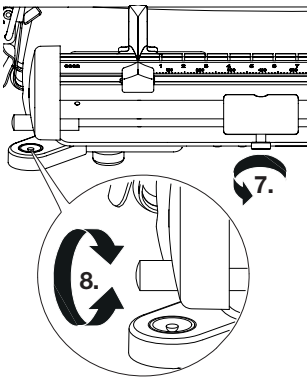

7. Fixez le poids de tarage à l'aide de la vis moletée.
8. Tournez la vis de tarage de précision jusqu'à ce que l'indicateur et le contre-indicateur soient parfaitement face à face.
La balance est prête à l'emploi.

5.2 Pesée



PRUDENCE !

Risque de chute, mauvaise utilisation

Afin d'éviter les chutes et une mauvaise utilisation de la balance, vous devez vous assurer avant chaque utilisation que la balance est prête à l'emploi.

- Assurez-vous que le plateau est bien fixé (voir « Fixation du plateau » à la page 53).
- Effectuez un contrôle fonctionnel (voir « Contrôle fonctionnel » à la page 60).
- Vérifiez que la coulisse est équilibrée (voir « Contrôler la position de la coulisse » à la page 54).

Pesée

1. Assurez-vous que le levier de blocage de la coulisse est débloqué (voir « Bloquer/Débloquer la coulisse » à la page 54).
2. Placez le nourrisson sur le plateau.




AVERTISSEMENT !



Risque de chute

Les pèses-bébés sont positionnés le plus souvent sur des plans de travail surélevés. Si le nourrisson tombe du plan de travail, il risque d'encourir des blessures graves, aux conséquences irréversibles, voire mortelles.

- Assurez-vous que l'appareil repose sur une surface solide et plane.
- Disposez les câbles de raccordement (le cas échéant) de manière à ce que personne ne puisse trébucher.
- Ne laissez jamais le nourrisson sans surveillance.

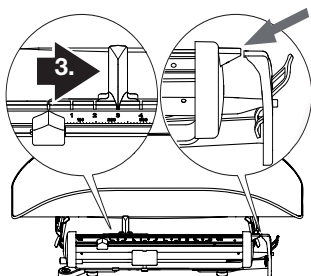

3. Faites coulisser le gros poids couissant jusqu'à ce que la coulisse soit à peu près équilibrée. L'indicateur et le contre-indicateur doivent être à peu près à la même hauteur.
4. Attendez jusqu'à ce que la coulisse cesse d'osciller.

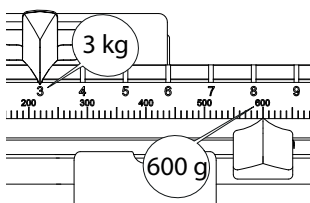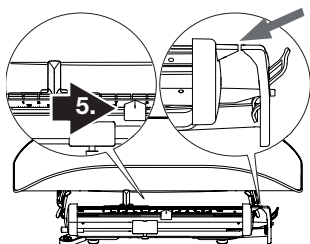

Déduire un poids supplémentaire

Avec le poids de tarage, vous pouvez compenser les poids supplémentaires (par ex. une serviette ou un coussin) jusqu'à 2500 g. Le poids supplémentaire est déduit du poids total.

ATTENTION !

Mesure faussée due à une dérivation de force

Si vous touchez la balance, le poids ne sera pas mesuré correctement.

- Faites attention à ne pas toucher la balance pendant que la coulisse oscille.

5. Faites coulisser le petit poids couissant jusqu'à ce que la coulisse soit équilibrée de manière exacte. L'indicateur et le contre-indicateur doivent être exactement à la même hauteur.
6. Attendez jusqu'à ce que la coulisse cesse d'osciller.

ATTENTION !

Mesure faussée due à une dérivation de force

Si vous touchez la balance, le poids ne sera pas mesuré correctement.

- Faites attention à ne pas toucher la balance pendant que la coulisse oscille.

7. Relevez le poids du nourrisson :
 - Relever la valeur en kilogrammes au niveau du gros poids couissant (ici : 3 kg = 3 000 g)
 - Relever la valeur en grammes au niveau du petit poids couissant (ici : 600 g)
 - Additionner les deux valeurs (ici : 3 600 g)

ATTENTION !

Mesure faussée due à une dérivation de force

Le poids mesuré sera faussé si un poids supplémentaire tel une grande serviette touche la surface sur laquelle la balance repose.

- Assurez-vous que les poids supplémentaires reposent uniquement sur le plateau de la balance.

1. Placez le poids supplémentaire sur la balance.
2. Équilibrez la coulisse (voir la section « Équilibrage de la coulisse » à la page 55).
3. Effectuez la pesée (voir « Pesée » à partir de la page 57).

6. TRAITEMENT HYGIÉNIQUE

ATTENTION !

Dommages matériels

Les nettoyants et désinfectants inappropriés risquent d'endommager les surfaces délicates de l'appareil.

- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni extra forts.
- N'utilisez pas d'alcool ni d'essence.
- Utilisez des désinfectants adaptés aux surfaces délicates. Vous trouverez des désinfectants appropriés dans le commerce.

6.1 Nettoyage

- ◆ Nettoyez les surfaces de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux imbibé de lessive de savon douce le cas échéant.

6.2 Désinfection

1. Assurez-vous que votre désinfectant convient aux surfaces sensibles et au verre acrylique.
2. Respecter les consignes du mode d'emploi du désinfectant.
3. Désinfectez l'appareil en le frottant avec un chiffon doux imprégné de produit désinfectant.
4. Observez les délais suivants :

Délai	Composant
Avant chaque mesure	Plateau
Après chaque mesure	Plateau
Si nécessaire	Éléments d'affichage, éléments de commande, boîtier

6.3 Stérilisation

La stérilisation de l'appareil est interdite.

7. CONTRÔLE FONCTIONNEL

- ◆ Assurez-vous du bon fonctionnement de l'appareil avant chaque utilisation.

Un contrôle fonctionnel complet comporte :

- Contrôle visuel pour détecter d'éventuels signes de détérioration mécanique
- Contrôle de l'horizontalité de l'appareil
- Contrôle visuel et fonctionnel des éléments d'affichage
- Contrôle fonctionnel de tous les éléments présentés au chapitre « Aperçu »
- Contrôle fonctionnel des accessoires optionnels

Si vous constatez des erreurs ou des écarts lors du contrôle fonctionnel, essayez d'abord d'éliminer l'erreur en consultant le chapitre « Que faire si... ».



PRUDENCE !

Risque de blessure

Si vous constatez des erreurs ou des écarts lors du contrôle fonctionnel, que les indications du chapitre « Que faire si... » ne permettent pas de corriger, n'utilisez pas l'appareil.

- Envoyez l'appareil à réparer au S.A.V. seca ou à un partenaire S.A.V. homologué.
- Suivez les indications de la section « Maintenance/Rééquilibrage » du présent document.

8. QUE FAIRE SI...

Incident	Cause/Solution
... la coulisse ne bouge pas quand on met du poids sur la balance ?	La balance n'est pas prête au fonctionnement - Retirer la protection pour le transport (bracelet élastique) - Débloquer le levier de blocage
... la balance affiche un poids non plausible ?	La balance n'est pas parfaitement horizontale - Régler l'horizontalité de la balance, voir 4.4 La coulisse n'a pas été équilibrée avant la pesée - Équilibrer la coulisse, voir 5.1 Dérivation de force, la balance touche un mur ou est posée sur une surface qui s'enfoncé (par ex. une serviette) - Accroître l'écartement mural - Installez la balance de manière à ce que seuls les pieds soient en contact avec le sol. Dérivation de force, un poids supplémentaire (par ex. une serviette) touche la surface sur laquelle la balance repose - S'assurer que les poids supplémentaires reposent exclusivement sur le plateau

9. MAINTENANCE/RÉÉTALONNAGE

9.1 Informations sur la maintenance (seca 725)

Le produit doit être installé avec soin et être entretenu régulièrement. Selon la fréquence d'utilisation, nous vous recommandons de procéder à la maintenance tous les 3 à 5 ans.

ATTENTION !

Mesures erronées dues à une maintenance incorrecte

- Les entretiens et réparations doivent être exclusivement confiés au S.A.V. seca ou à un partenaire S.A.V. autorisé.
- Pour connaître le partenaire SAV le plus proche, rendez-vous sur le site www.seca.com ou envoyez un e-mail à service@seca.com.

9.2 Informations sur la maintenance et le réétalonnage (seca 745)

Nous recommandons de réaliser l'entretien de l'appareil avant un nouvel étalonnage.

ATTENTION !
Mesures erronées dues à une maintenance incorrecte

- Les entretiens et réparations doivent être exclusivement confiés à des partenaires SAV autorisés.
- Pour connaître le partenaire SAV le plus proche, rendez-vous sur le site www.seca.com ou envoyez un e-mail à service@seca.com.

Faites effectuer par des personnes autorisées un réétalonnage conformément aux dispositions légales nationales.

Un réétalonnage est dans tous les cas nécessaire si une ou plusieurs marques de sécurité sont endommagées.

10.CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

10.1 Caractéristiques techniques générales

Caractéristiques techniques générales seca 745/725	
Dimensions • Largeur • Hauteur • Profondeur	555 mm 185 mm 320 mm
Poids à vide	env. 6 kg
Conditions ambiantes de fonctionnement • Température • Pression atmosphérique • Humidité de l'air	+10 °C à +40 °C (50 °F à 104 °F) 700 - 1060 hPa 30 % - 80 % sans condensation
Conditions ambiantes de stockage • Température • Pression atmosphérique • Humidité de l'air	-10 °C à + 65 °C (14 °F à 149 °F) 700 - 1060 hPa 0 % - 95 % sans condensation

Caractéristiques techniques générales seca 745/725	
Conditions ambiantes de transport • Température • Pression atmosphérique • Humidité de l'air	-10 °C à + 65 °C (14 °F à 149 °F) 700 - 1060 hPa 0 % - 95 % sans condensation
Dispositif médical selon la directive 93/42/CEE	Classe I avec fonction de mesurage

10.2 Caractéristiques de pesage

Caractéristiques de pesage seca 745	
Étalonnage selon la directive 2014/31/EU	Classe III
Charge maximale	16 kg
Charge minimale	0,2 kg
Graduation (e)	10 g
Étendue de tarage	max. 2,5 kg
Précision lors du premier étalonnage : • à 5 kg • plus de 5 kg	± 5 g ± 10 g

Caractéristiques de pesage seca 725	
Charge maximale	16 kg
Graduation (d)	5 g
Étendue de tarage	max. 2,5 kg
Précision • à 4 kg • 4 kg à 16 kg	±10 g ±0,25 %

11. MISE AU REBUT

Cet appareil est fabriqué à partir de matières premières de haute qualité qui sont réutilisables. Assurez la mise au rebut de l'appareil conformément aux lois et dispositions locales de votre pays.

12. GARANTIE

Une garantie de deux ans à compter de la date de livraison est accordée pour les défauts de matière ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces amovibles, comme par ex. les piles, les câbles, les blocs d'alimentation, les accus, etc. Les défauts couverts par la garantie sont réparés gratuitement sur présentation de la facture d'achat par le client. Aucune autre demande de réparation ne peut être prise en compte. Les frais de transport sont à la charge du client si l'appareil n'est pas installé à la même adresse que celle du client. En cas de dommages dus au transport, le cas de garantie peut être invoqué uniquement si l'emballage d'origine complet a été utilisé pour les transports et si la balance a été immobilisée et fixée conformément à l'emballage initial. Tous les éléments de l'emballage doivent par conséquent être conservés.

Aucun cas de garantie ne peut être invoqué si l'appareil est ouvert par des personnes qui ne sont pas explicitement autorisées par seca.

Nous prions nos clients à l'étranger de bien vouloir contacter directement le revendeur de leur pays respectif pour les cas de garantie.

13. CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Nous, soussignés seca gmbh & co. kg, certifions par la présente que le produit satisfait aux dispositions des directives européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible sous : www.seca.com.

REALME
matériel médical
Tel 03 22 72 55 24
Fax 03 22 72 17 35
contact@realme.fr
1 rue des violettes 80 480 SALEUX