




Mise en garde ! Ce symbole indique des informations importantes relatives à la sécurité. Suivez attentivement ces instructions.

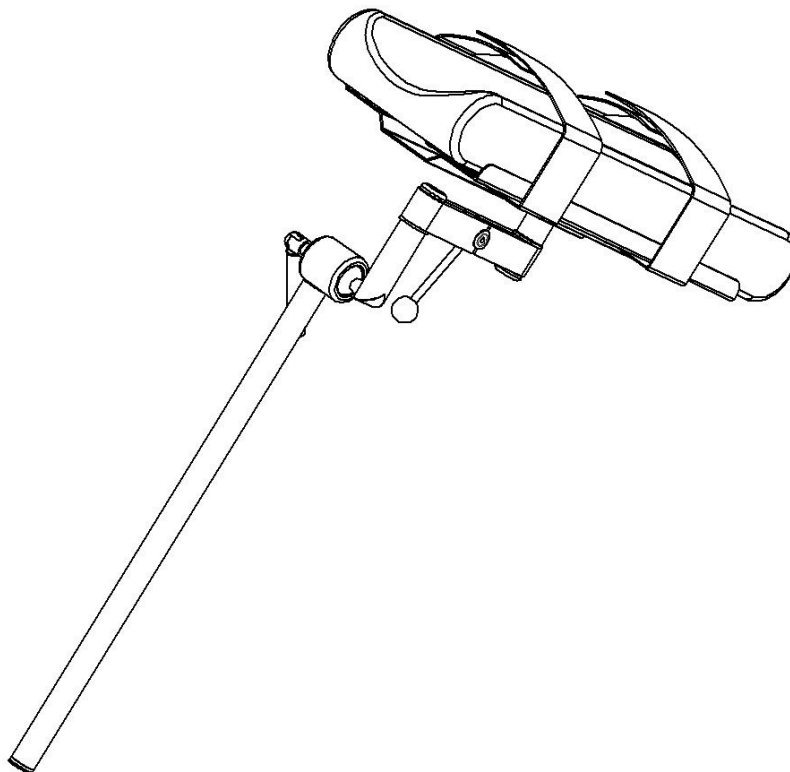

Veuillez lire le manuel d'instructions avant utilisation ! Il est important de bien comprendre le contenu du manuel d'instructions avant d'utiliser l'équipement.

CE

2021-04-15

Numéro du document : M10-389FR rev.01

Utilisation prévue

Support pour bras destiné au soutien et au positionnement du bras en position surélevée pour les patients en position latérale fixe pendant la chirurgie. Le produit doit être utilisé par des professionnels de la santé dans une structure médicale.




Consignes de sécurité

Charge maximale : 15 kg en répartition uniforme, ce qui correspond à un poids patient de 250 kg conformément aux normes EN 60601-1 et EN 60601-2.


Avant utilisation, assurez-vous du bon fonctionnement !

Lors du desserrage du valet de bloqueur sur le clameau ou sur le support pour bras pour régler la position, soutenez le dessous du support pour bras pour l'empêcher de descendre de manière incontrôlée en position inférieure !


Le service de maintenance et l'entretien préventif doivent être effectués par du personnel agréé.

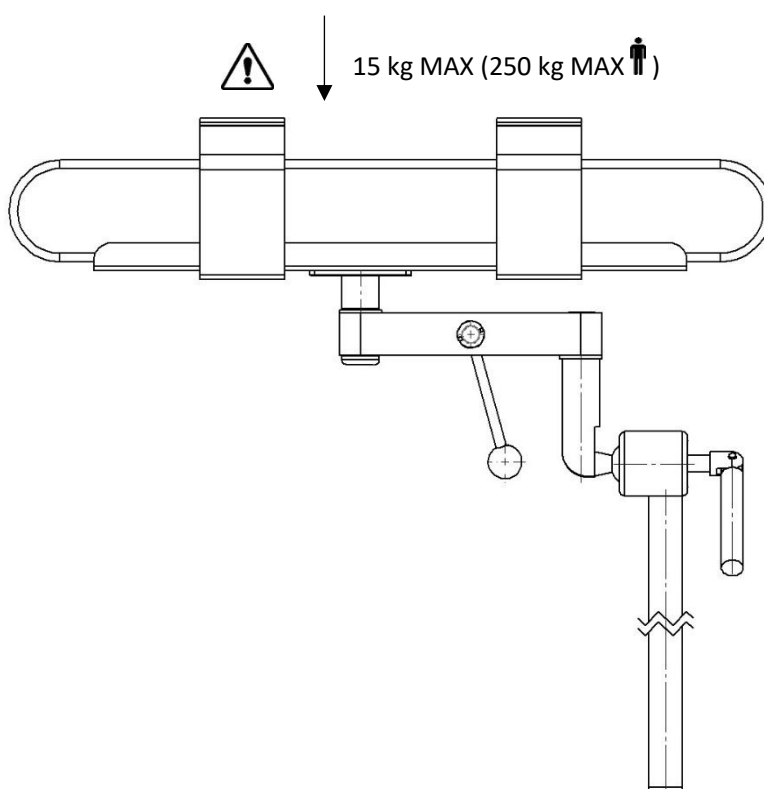

Installation

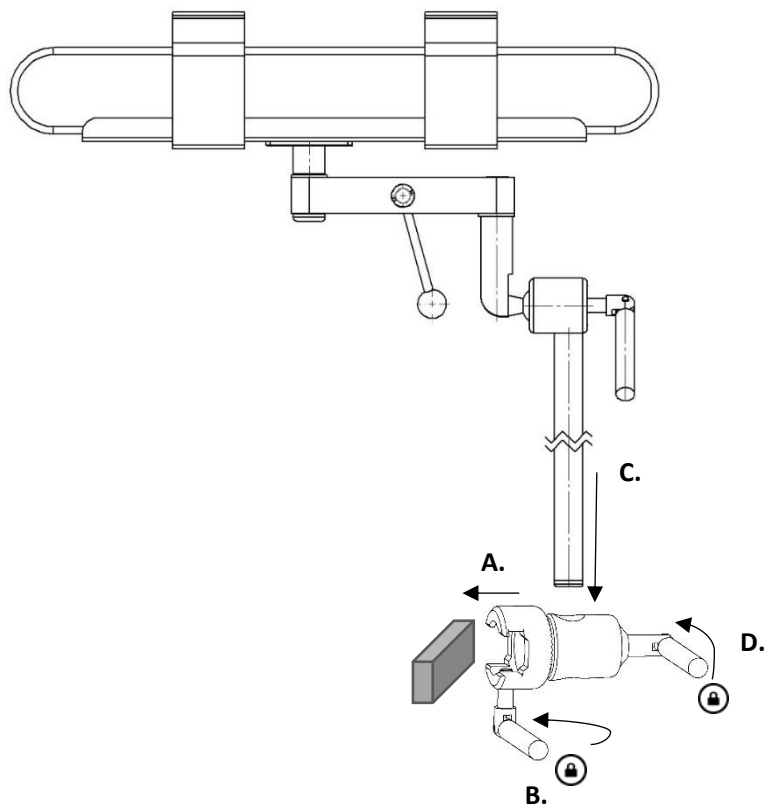


Réglage de la position

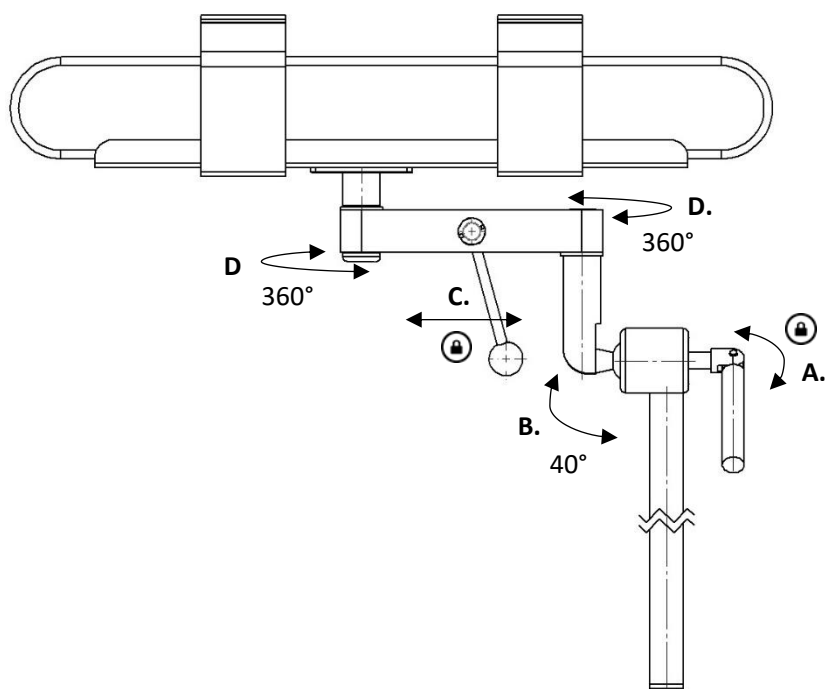

Maintenance

Le service de maintenance, l'entretien préventif, le réglage et les réparations doivent être effectués par du personnel agréé. Modifier la structure sans le consentement écrit du fabricant est strictement interdit.

Réglage du dispositif de verrouillage

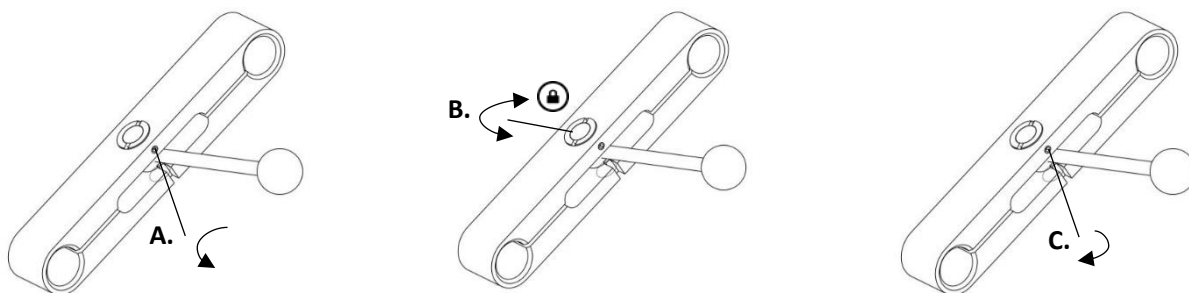

Outil : Clé hexagonale de 2 mm.

Nettoyage

Nettoyez avec un détergent antiseptique dont le pH est compris entre 6 et 8 et de l'eau chaude. Vous pouvez utiliser de l'éthanol sur les surfaces en métal. Essuyez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de détergent acide ou alcalin puissant.


Contrôle

Vérifiez qu'aucune partie n'est desserrée et ni endommagée. Vérifiez la fonction de verrouillage dans les charnières du support pour bras. Vérifiez que le coussin est propre et qu'il n'est pas endommagé.

Entretien annuel

Une fois par an vous devez nettoyer soigneusement le support pour bras, lubrifier les parties amovibles, tester la fonction de verrouillage et, si besoin, la régler.

Pièces de rechange

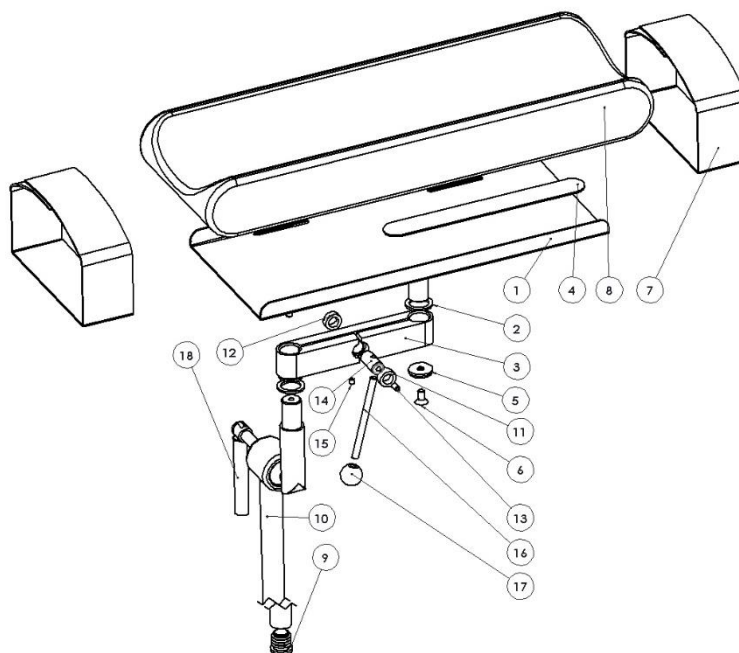

N°	Description	Unités	Article n°
1.	Plaquette pour bras	1	11330
2.	Rondelle d'écrou	2	11547
3.	Support pivot	1	10300
4.	Dispositif pour coussin	2	11550
5.	Rondelle d'écrou	2	10004
6.	Vis MF6S M6x12 A2	2	-
7.	Sangle	2	10-383-L
8.	Coussin	1	11551
9.	Bouchon en plastique	1	IKP 2015-17-S
10.	Montant	1	11798
11.	Écrou fileté à gauche	1	10302
12.	Écrou de réglage	1	10301
13.	Vis de réglage MSK6SS M5x8 A2	1	-
14.	Vis	1	10303
15.	Vis de réglage MSK6SS M4x5 A2	1	-
16.	Levier	1	10304
17.	Sphère	1	K20M6S
18.	Valet de bloqueur	1	10062

Spécifications techniques

Charge de travail maximale	15 kg en répartition uniforme, ce qui correspond à un poids patient de 250 kg conformément aux normes EN 60601-1 et EN 60601-2.
Poids	2,8 kg
Dimension (H x l x L)	625 x 155 x 450 mm
Matériau du support pour bras	Acier inoxydable
UDI-DI	07350111831585

REALME

matériel médical

Tel 03 22 72 55 24

Fax 03 22 72 17 35

contact@realme.fr

1 rue des violettes 80 480 SALEUX

REISON
MEDICAL

Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SUÈDE