


Clameau radial 10-305 incluant les versions



Version	Description	Type de tige
10-305	Clameau (rail UE 25x10 mm) avec goujon en V	  Ø 16-20 mm
10-305-P	Clameau (rail UE 25x10 mm) avec goujon plat	 Ø 16-20 mm
10-305-UK	Clameau (rail UK 1 1/4" x 1/4") avec goujon en V	  Ø 16-20 mm
10-305-UK-P	Clameau (rail UK 1 1/4" x 1/4") avec goujon plat	 Ø 16-20 mm
10-305-US	Clameau (rail US 1 1/8" x 3/8") avec goujon en V	  Ø 16-20 mm
10-305-US-P	Clameau (rail US 1 1/8" x 3/8") avec goujon plat	 Ø 16-20 mm

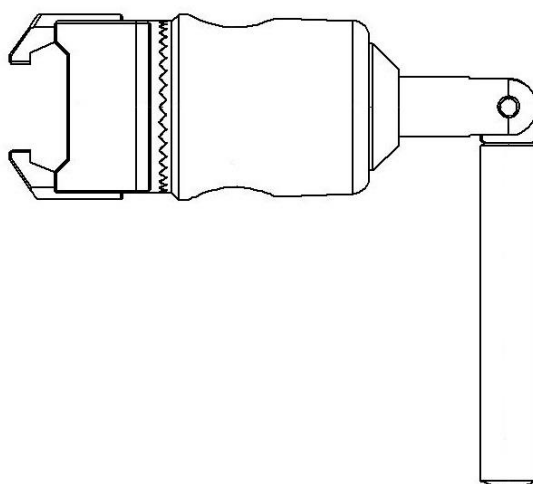

Mise en garde ! Ce symbole indique des informations importantes relatives à la sécurité. Suivez attentivement ces instructions.



Veuillez lire le manuel d'instructions avant utilisation ! Il est important de bien comprendre le contenu du manuel d'instructions avant d'utiliser l'équipement.



2021-04-19

Numéro du document : M10-305FR rev.01

Utilisation prévue

Clameau destiné à fixer et positionner des accessoires, avec une taille de tige de $\varnothing$ 16-20 mm, sur le rail pour accessoires sur les tables d'opération et d'examen. Le produit doit être utilisé par des professionnels de la santé dans une structure médicale.




Consignes de sécurité

Charge maximale : 25 kg, selon EN 60601-1 et EN 60601-2.

Avant utilisation, assurez-vous du bon fonctionnement !


Lors du desserrage des valets de bloqueur pour régler la hauteur ou la position du clameau, soutenez l'accessoire pour l'empêcher de descendre de manière incontrôlée en position inférieure.

Le service de maintenance et l'entretien préventif doivent être effectués par du personnel agréé.

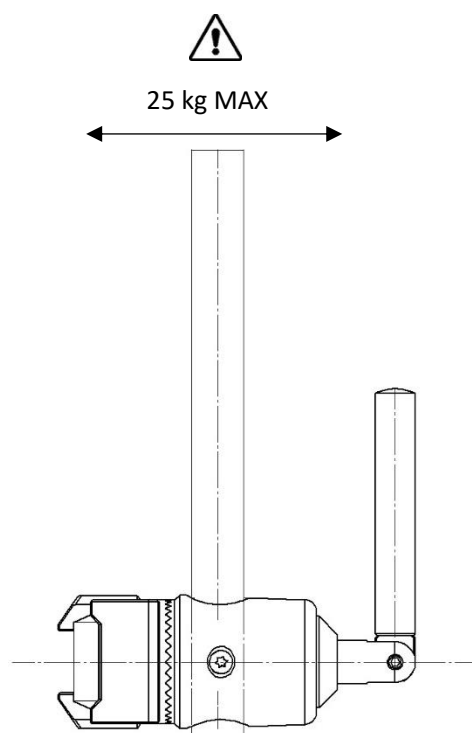


Instructions d'utilisation

Installation

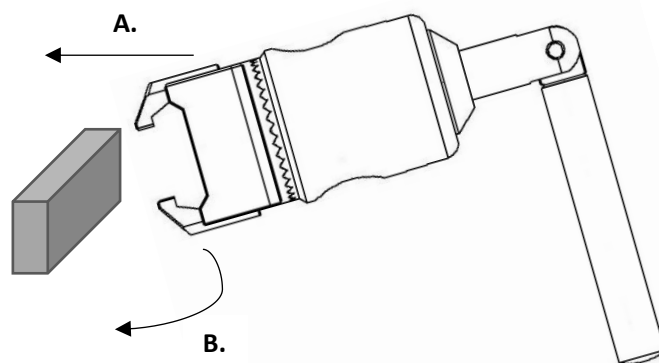

Utilisation

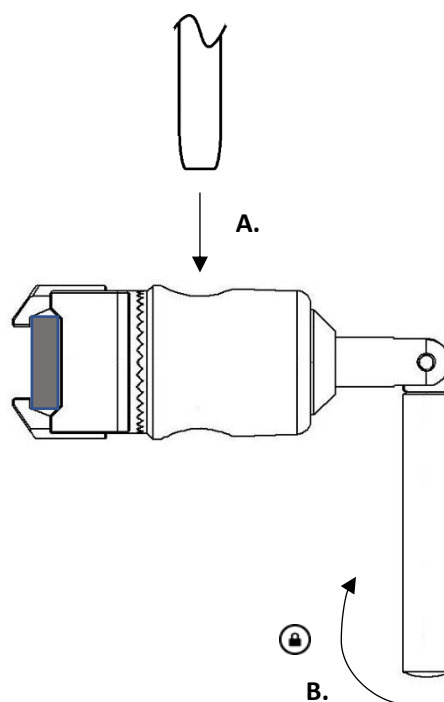

Maintenance



Le service de maintenance, l'entretien préventif, le réglage et les réparations doivent être effectués par du personnel agréé. Modifier la structure sans le consentement écrit du fabricant est strictement interdit.

Nettoyage

Nettoyez avec un détergent antiseptique dont le pH est compris entre 6 et 8 et de l'eau chaude. Vous pouvez utiliser de l'éthanol. Essuyez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de détergent acide ou alcalin puissant.


Contrôle

Vérifiez qu'aucune partie n'est desserrée et ni endommagée. Vérifiez la fonction de verrouillage du clameau et la fonction de positionnement et de verrouillage de la tige de l'accessoire dans le clameau.

Entretien annuel

Une fois par an vous devez nettoyer soigneusement le clameau, lubrifier les parties amovibles et tester la fonction de verrouillage.

Pièces de rechange

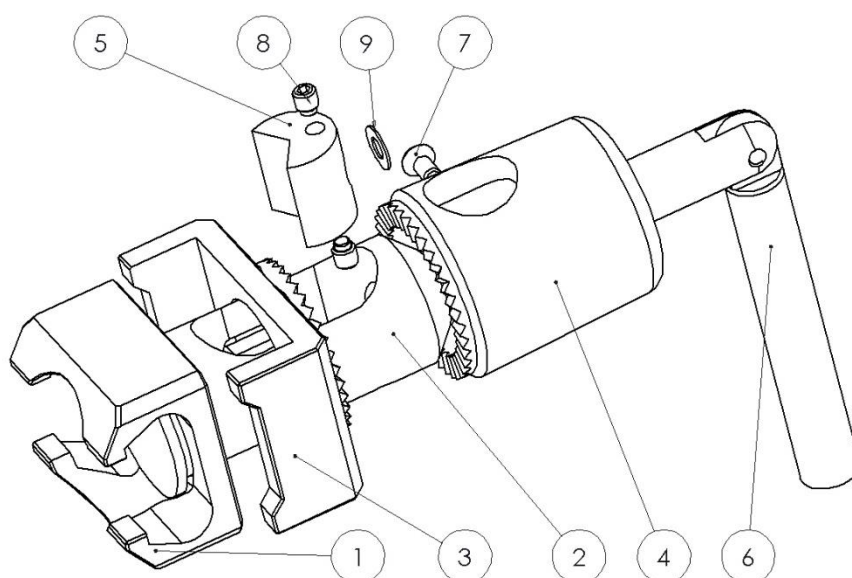

		Version :					
		10-305	10-305-P	10-305-UK	10-305-UK-P	10-305-US	10-305-US-P
	Description	Unités	Article n°	Article n°	Article n°	Article n°	Article n°
1.	Pince	1	11042	11042	11256	11256	11132
2.	Guide	1	10320	10320	10320	10320	10320
3.	Plaque d'appui	1	11043	11043	11257	11257	11133
4.	Cylindre d'engrenage	1	10316	10316	10316	10316	10316
5.	Goujon	1	10325	10429	10325	10429	10325
6.	Poignée de verrouillage	1	10346	10346	10346	10346	10346
7.	Vis MKFT M4x8 A2	1	-	-	-	-	-
8.	Vis de réglage MT6SS M5x6 A2	2	-	-	-	-	-
9.	Rondelle d'écrou PB 5x10x5	1	-	-	-	-	-

Spécifications techniques

Charge de travail maximale 25 kg, selon EN 60601-1 et EN 60601-2.

Poids 0,9 kg

Matériaux du clameau
Acier inoxydable
Laiton

Dimension (H x l x L) 45 x 60 x 115 mm

Version	UDI-DI
10-305	07350111830076
10-305-P	07350111830083
10-305-UK	07350111830090
10-305-UK-P	07350111830106
10-305-US	07350111830113
10-305-US-P	07350111830120

REALME

matériel médical

Tel 03 22 72 55 24

Fax 03 22 72 17 35

contact@realme.fr

1 rue des violettes 80 480 SALEUX

REISON
MEDICAL

Reison Medical AB

Eriksbergsvägen 32A

734 92 Hallstahammar

SUÈDE

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se