


MAD Nasal


Dispositif d'atomisation pour muqueuse nasale

Utilisation du dispositif MAD Nasal d'atomisation pour muqueuse nasale*


Procédure

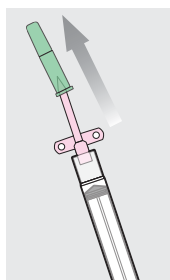


1 Ôtez et jetez le capuchon vert de l'adaptateur pour flacon

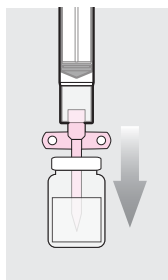


2 Percez le flacon contenant le médicament à l'aide de l'adaptateur pour flacon à seringue

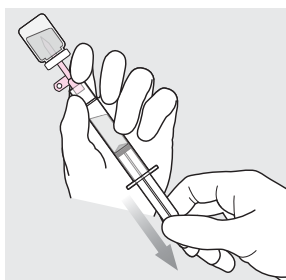


3 Aspirez le volume de médicament nécessaire au traitement de votre patient (un volume supplémentaire de 0,1 ml doit être aspiré afin de compenser le volume de l'espace mort du dispositif)

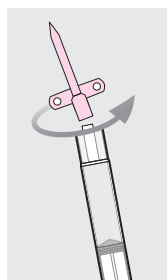


4 Retirez (en dévissant) la seringue de l'adaptateur pour flacon

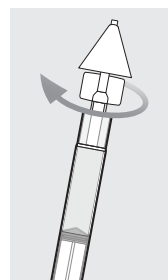


5 Fixez le dispositif MAD Nasal à la seringue à l'aide du raccord Luer Lock

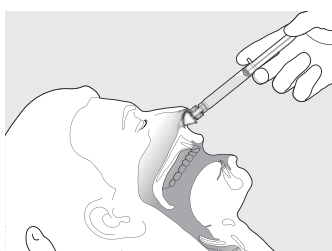

6 Avec votre main libre, maintenez l'occiput afin de le stabiliser, placez l'extrémité du dispositif MAD Nasal contre la narine en le dirigeant légèrement vers le haut et l'extérieur (en direction de la partie supérieure de l'oreille)

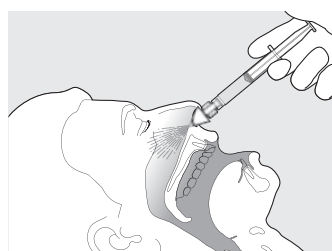

7 Appuyez énergiquement sur le piston de la seringue afin d'administrer la moitié de la dose de médicament dans la narine

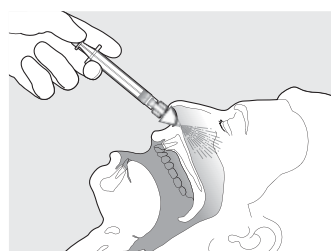

8 Placez le dispositif sur l'autre narine, répétez les étapes 6 et 7 et administrez la dose restante de médicament dans la narine, si indiqué

Caractéristiques du dispositif MAD Nasal d'atomisation pour muqueuse nasale

Taille de particule type	30–100 microns
Espace mort du système	MAD100/MAD140 = 0,12 ml MAD100OS/MAD140OS = 0,13 ml MAD110/MAD110OS = 0,15 ml MAD130/MAD130OS = 0,15 ml MAD300 = 0,06 ml
Diamètre de l'embout	0,17" (4,3 mm)

Pour plus d'informations, visitez le site Imaco.com/products

*À utiliser avec les médicaments autorisés par voie intranasale

Conseils pour augmenter vos chances de réussite

1. Minimisez le volume, maximisez la concentration

- Utilisez un médicament présentant une concentration adaptée

2. Maximisez la surface muqueuse absorbante totale

- Atomisez le médicament (au lieu de le faire couler) afin de couvrir la surface la plus vaste possible
- Administrez le médicament dans les DEUX narines afin de doubler la surface absorbante
- Dirigez le dispositif légèrement vers le haut et l'extérieur afin de couvrir les cornets nasaux et la muqueuse olfactive

3. Prêtez une attention particulière aux caractéristiques anormales de la muqueuse

- Le mucus, le sang et les vasoconstricteurs réduisent l'absorption
- Aspirez les narines ou envisagez d'utiliser un autre mode d'administration du médicament dans ce genre de situation



Dispositif MAD Nasal avec adaptateur pour flacon et seringue d'1 ml (ou de 3 ml)

Teleflex, le logo Teleflex, MAD et MAD Nasal sont des marques commerciales ou des marques déposées de Teleflex Incorporated ou de ses filiales immatriculées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations contenues dans ce document ne se substituent en aucun cas au mode d'emploi du produit. Les produits présentés dans ce document peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter le représentant de votre pays. Toutes les données sont à jour au moment de l'impression (07/2017). Susceptible de modifications techniques sans préavis. ©2017 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés. 94 06 99 - 00 00 02 - REV A - 07 17 01

Teleflex

Distribué par : Siège social international de Teleflex, Irlande · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
France Tél. +33 (0)5 62 18 79 40 · info.fr@teleflex.com
Belgique Tél. +32 (0)2 333 24 60 · info.be@teleflex.com
Suisse Tél. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com
teleflex.com

REALME
matériel médical
Tel 03 22 72 55 24
Fax 03 22 72 17 35
contact@realme.fr
1 rue des violetttes 80 480 SALEUX